



HOFFMANN'S

SCHELLACK BASISPLATTEN

Shellac Base Plates



For instructional film and
for further languages visit our website
www.hoffmann-dental.com

12 x		REF 82825
12 x		REF 82826
8 x / 4x		REF 82824
100 x		REF 8282105
100 x		REF 8282106
50 x / 50x		REF 8282104



Made in Germany

Hergestellt von/ manufactured by

Hoffmann Dental Manufaktur GmbH

Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin, Germany
Tel: +49 30 820099-0
Fax: +49 30 8228145
quality@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 06/2026

HOFFMANN'S BASISPLATTEN

Shellack Basisplatten, rosa



Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt/-techniker

Zusammensetzung der Basisplatten:

Shellack, Stearin, Talkum, Glimmer, Farbe

Anwendungsgebiete:

individuelle Abdruckklöfel, Basis für Bissnahmen, Basis für Zahnaufstellungen

Verarbeitungsempfehlung:

Die Basisplatte wird mit fächernder Flamme oder Heißluftfön erweicht und mit den Fingern auf das Gipsmodell gedrückt. Überflüssige Masse wird, solange sie noch weich ist, mit einer Schere oder einem Skalpell abgeschnitten. Anschließend wird die Platte nochmals erweicht und die noch nicht anliegenden Stellen gut angedrückt. Ränder in der Umschlagfalte durch Einschlagen und Ankneten korrigieren und abrunden.

Hinweise:

Niemals eine nicht genügend erwärmte Basisplatte auf das Gipsmodell drücken, da es beschädigt werden könnte. Unterschneidende Bereiche am Modell ausblocken. Beim Bearbeiten mit Fräsern auf eine geringe Umdrehungszahl achten, damit der Fräser nicht zu heiß wird und sich mit Material zusetzt.

Packungsgrößen:

- Normalpackungen mit je 12 Platten Oberkiefer, Unterkiefer oder sortiert
- Laborpackungen mit je 100 Platten Oberkiefer, Unterkiefer oder sortiert

HOFFMANN'S Basisplatten

- dient nur dem zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch
- kühl und trocken lagern
- direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

HOFFMANN'S BASE PLATES

Shellac Base Plates, pink



Instruction for use for the dentist / dental technician

Composition:

shellac, stearin, talcum, mica, colour

Areas of Application:

Individual impression trays, basis for bite registration, basis for arranging and articulating artificial teeth.

Processing Recommendation:

Soften the base plate with a fanned flame or heat gun/blow dryer and press onto the plaster cast with your fingers. Excess material can be removed with scissors or scalpel while soft. Soften the plate again and press the edges into place and round them off.

Notes:

To prevent possible damage, never press an insufficiently heated base plate onto a plaster cast. Block out undercuts. Use milling cutters slowly.

Available Package Sizes:

- Standard size containing 12 plates, available in upper jaw, lower jaw or assorted.
- Laboratory size containing 100 plates, available in upper jaw, lower jaw or assorted.

HOFFMANN'S Base Plates

- for dental and dental laboratory use only
- keep cool and dry
- do not expose to direct insolation
- do not use after the expiration date

HOFFMANN'S PLAQUES BASES

Plaques Bases en Gomme Laque, rose



Mode d'emploi pour le dentiste / technicien dentaire

Composition des plaques bases:

gomme laque, stéarine, talc, mica, colorant

Domaines d'application:

Confection de porte empreinte individuel, prise d'articulé, enregistrement de mordu.

Conseils d'utilisation:

Ramollir la plaque base à l'aide d'une flamme ou d'un pistolet à air chaud et l'appliquer avec les doigts sur le modèle en plâtre. Retirer la gomme laque superflue tant qu'elle est encore molle à l'aide de ciseaux ou d'un scalpel. Ramollir à nouveau la plaque base et s'assurer que toute la surface est bien en contact avec le modèle. Corriger et arrondir les bords au niveau des sillons en les repliant ou bien par pression avec les doigts.

Indications:

Ne jamais appliquer sur le modèle de plâtre une plaque base qui n'a pas été suffisamment chauffée, cela pourrait endommager le modèle. Comblar au préalable les zones de repli du modèle afin de pouvoir retirer sans problème la plaque base une fois durcie. Dans le cas de travaux avec fraise, choisir une vitesse de rotation faible, afin que la fraise ne chauffe pas trop et ne colle pas à la gomme laque.

Conditionnement:

- Boîte de 12 plaques (format classique) maxillaires, mandibulaires ou assortiment.
- Boîte de 100 plaques (format de laboratoire) maxillaires, mandibulaires ou assortiment.

HOFFMANN'S Plaques Bases

- est réservé exclusivement aux dentistes et aux techniciens dentaires
- conserver au sec et au frais
- ne pas exposer en plein soleil
- ne pas utiliser au-delà de la date de péremption



HOFFMANN'S


SCHELLACK BASISPLATTEN

Shellac Base Plates



For instructional film and
for further languages visit our website
www.hoffmann-dental.com

12 x		REF 82825
12 x		REF 82826
8 x / 4x		REF 82824
100 x		REF 8282105
100 x		REF 8282106
50 x / 50x		REF 8282104

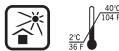

Made in Germany

Hergestellt von/manufactured by

Hoffmann Dental Manufaktur GmbH

Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin, Germany
Tel: +49 30 820099-0
Fax: +49 30 8228145

quality@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 06/2026

HOFFMANN'S PLACAS BASE

Placas Base de Goma Laca, rosa

(es)

Instrucciones de uso para el dentista / técnico dental

Composición de las placas base:

goma laca, estearina, talco, mica, colorante

Campos de aplicación:

Cucharas de impresiones individuales, base para el registro oclusal, base para el montaje de dientes

Preparación:

Proceda a ablandar la placa base con una llama moderada, oprimiendo el modelo de yeso con los dedos. La masa sobrante se corta con unas tijeras antes de que se endurezca. A continuación se vuelve a ablandar la placa para oprimir bien las zonas que no estén bien amoldadas a la superficie. Los bordes en el surco se corige doblando o amasando el material excedente.

Precauciones:

No presione nunca contra el modelo de yeso una placa de base que no haya alcanzado la temperatura requerida, porque el modelo se puede estropear. Socavaduras se llena con cera o silicona. Si usa una fresa para cortar la placa se use con baja velocidad, para que no se llena con material caliente.

Tamaños de envase:

- Envase normal contener 12 placas: superior mandíbula, inferior mandíbula o Surtido.
- Envase para laboratorio contener 100 placas: superior mandíbula, inferior mandíbula o Surtido.

HOFFMANN'S Placas Base

- Sirve únicamente para usos odontológico
- consérvese en lugar fresco y seco
- evite la exposición directa al sol
- No utilizar después de la fecha de caducidad

HOFFMANN'S БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

базовые пластины – шеллак

(ru)

Информация по применению для стоматолога / зубного техника

Состав:

Базовые пластины содержат: шеллак, стеарин, тальк, слюда, краситель

Показания к применению:

индивидуальные оттиски, основа для снятия прикуса, основа для постановки зубов

Рекомендация обработки:

Для размягчения базовую пластину разогреть на развешивающемся огне или при помощи специального фена и вдавить пальцами в гипсовую модель. Излишнюю массу отрезать ножницами или скальпелем, пока она ещё мягкая. После этого пластину вновь размягчить и хорошо прижать выступающие части. Для коррекции переходной складки завернуть края.

Примечания:

Не вдавливать в гипсовую модель недостаточно разогретую пластину, она может быть повреждена. Убрать подпирания на модели. При обработке на фрезере соблюдать низкое число оборотов, чтобы избежать перегрева фрезера и таким образом соединения с материалом.

Формы выпуска:

- В нормальной упаковке 12 пластин.
- В упаковке для лаборатории 100 пластин.

HOFFMANN'S БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

- только для зубоорачебного употребления.
- хранить в сухом и прохладном месте
- не подвергать солнечному облучению
- не применять после истечения срока годности

HOFFMANN'S BAZ PLAKLAR

Şellak Baz Plaklar

(fr)

Diş doktorları ve diş teknisyenleri için kullanım talimatı

İçerik:

Şellak, stearin, talk pudrası, mika taş, doğal renk maddesi

Kullanım Alanları:

Bireysel kaşık yapımı, diş seçimi bazı, diş dizimi bazı

Tavsiye edilen kullanım şekli:

Baz plağı fanlı ateşte ya da fön ile yumuşatınız ve döküm alçısına aktararak parmaklarınızla şekil veriniz. Fazlalık, baz plak halen yumuşak iken makas ya da neşter yardımı ile kesilebilir. Hemen sonrasında baz plağı tekrar yumuşatınız, kenarları düzeltiniz ve yerine yerleştirip yuvarlaştırtınız.

Not:

Olası hasarı önlemek için, yetersiz ısıtılmış baz plağı kesinlikle döküm alçısına aktarmayınız. Döküm alçısının altında kalan kısımları çıkarınız. Frez ile çalışırken, çok sıcak olup malzemeyi etkilememesi için frezin devir sayısına dikkat ediniz.

Paketleme şekli:

- 12 plak içeren standart paket: Üst çene, Alt çene ya da karışık
- Laboratuarlarda kullanılmak üzere her biri 100 plak içeren paket: Üst çene, Alt çene ya da karışık

HOFFMANN'S Baz Plakar

- Sadece dişhekimliğinde kullanılmak üzere
- Kuru ve serin ortamda saklayınız
- Direkt güneş ışığından koruyunuz
- Son kullanma tarihi geçmiş ise kullanmayınız